


Application Nucleus[®] Smart

pour Android[™]

P1285539 Version 1.0

Mode d'emploi

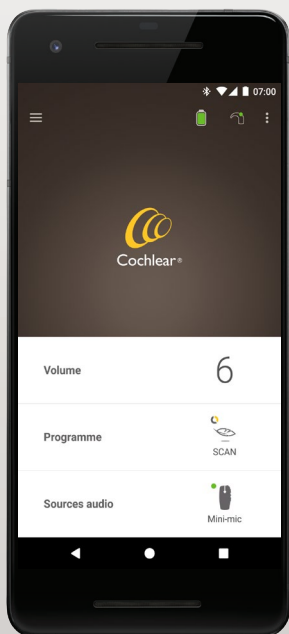

Hear now. And always



Cochlear[®]

Pour commencer !

L'application Nucleus Smart est conçue pour vous permettre d'effectuer les réglages de votre processeur (tel que modifier le volume ou les programmes, et sélectionner les sources audio), et de surveiller les niveaux de batterie ainsi que de recevoir des alertes si l'antenne est éteinte ou si vous rencontrez des problèmes de processeur.

Étape		Page
1	Téléchargez l'application Nucleus® Smart, version 1.0, sur votre smartphone Android* en vous rendant sur Google Play™	-
2	Exécutez l'application Nucleus Smart	3
3	Connectez-vous à votre compte Cochlear	-
4	Jumelez votre/vos processeur(s) avec votre application <i>Consultez le Guide de jumelage du processeur Nucleus 7 pour Android</i>	-
5	Lancez l'application !	4

* L'application Nucleus Smart nécessite Android 5.0 ou une version ultérieure. Nous recommandons les smartphones Android répertoriés à l'adresse suivante : www.nucleusmartapp.com/android.

Principe de jumelage

Jumelage de votre/vos processeur(s).....	2
Déconnexion de votre/vos processeur(s).....	2

Utilisation

Utilisation de l'application Nucleus Smart.....	3
Écran d'accueil.....	4
Contrôle d'un ou de deux processeurs	5
Réglage du volume.....	7
Changement de programme	8
Diffusion d'un contenu audio	9
Réglage du contenu audio diffusé	10
Réglage de la sensibilité.....	11
Réglage des basses et hautes fréquences	12
Réglage de la limite du volume global	13
Utilisation de ForwardFocus	14
Contrôle de l'état.....	16
Menu Paramètres	18
Dépannage.....	20

Pour plus d'informations, reportez-vous au *mode d'emploi du processeur Nucleus 7*.

Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres informations, consultez le site : www.cochlear.com/

Jumelage de votre/vos processeur(s)

Vous devez jumeler votre/vos processeur(s) avec votre application pour pouvoir utiliser les fonctions de communication et de contrôle de l'application.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, prenez garde lorsque vous connectez votre processeur à des appareils comme des smartphones. Ne le connectez qu'à des appareils protégés, par mot de passe ou code PIN, par exemple. Évitez de le connecter à des appareils dont le système d'exploitation a été modifié.

Pour des instructions détaillées étape par étape, reportez-vous au *Guide de jumelage du processeur Nucleus 7 pour Android*.

Déconnexion de votre/vos processeur(s)


Si vous changez de processeur(s), par exemple si vous recevez un nouveau processeur suite à une réparation, vous devez :

- tout d'abord, **déconnecter** le ou les anciens processeurs,
- puis, **jumeler** le ou les nouveaux processeurs.

Pour des instructions détaillées étape par étape, reportez-vous au *Guide de jumelage du processeur Nucleus 7 pour Android*.


Utilisation de l'application Nucleus Smart

1. Appuyez sur l'icône **Nucleus Smart** pour démarrer l'application.

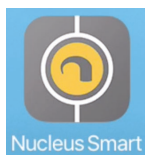

2. **Connectez-vous à l'application.** Lors de la première utilisation de l'application, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Cochlear.
3. **Jumelez votre/vos processeur(s) avec votre application.**
Pour des instructions détaillées étape par étape, reportez-vous au *Guide de jumelage du processeur Nucleus 7 pour Android*.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de l'application.


Écran d'accueil

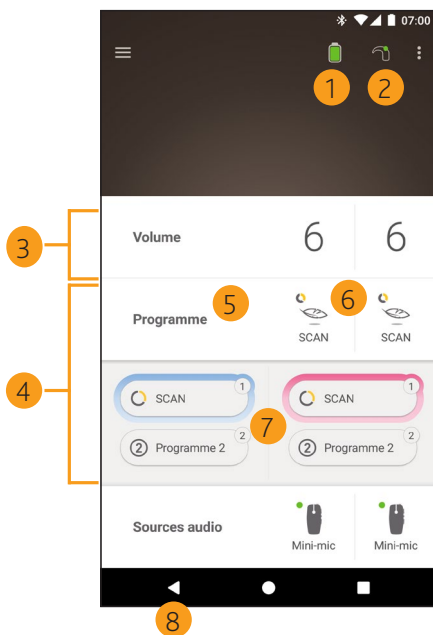

- 1 Niveau de charge de la batterie du processeur
- 2 État du processeur
- 3 Panneau de configuration (fermé)
- 4 Panneau de configuration (ouvert)
- 5 Nom du paramètre de réglage
- 6 Valeur actuelle du paramètre de réglage
- 7 Contrôles du paramètre de réglage
- 8 Bouton Retour

Contrôle d'un ou de deux processeurs

Une barre verte et une commande s'affichent si **un seul** processeur est jumelé.

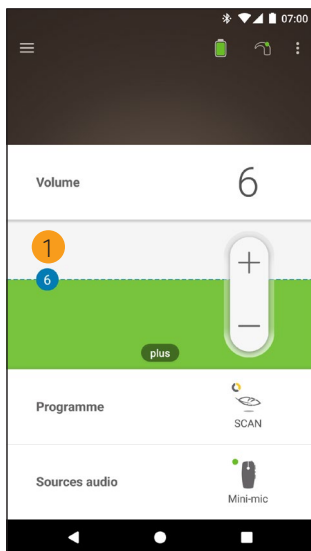


- 1 Valeur par défaut (définie par le réglage). Cette valeur peut varier selon le programme et les différents processeurs.

Si **deux processeurs sont jumelés**, vous pouvez les contrôler simultanément (un seul bouton de commande) ou séparément (deux boutons, comme indiqué ci-dessous) :

- Les commandes de gauche sont bleues.
- Les commandes de droite sont rouges.


Pour les modifier, utilisez le *Menu Paramètres* (voir page 18).

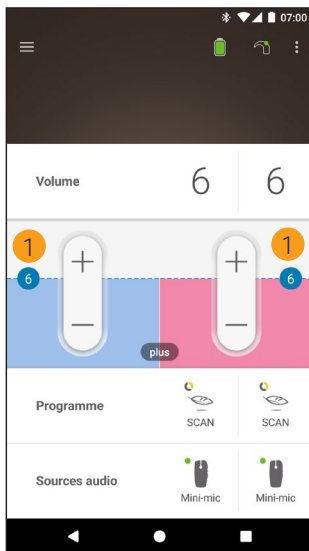

- 1 Valeur par défaut (définie par le régleur). Cette valeur peut varier selon le programme et les différents processeurs.


Réglage du volume

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **+ / -** pour modifier le volume.

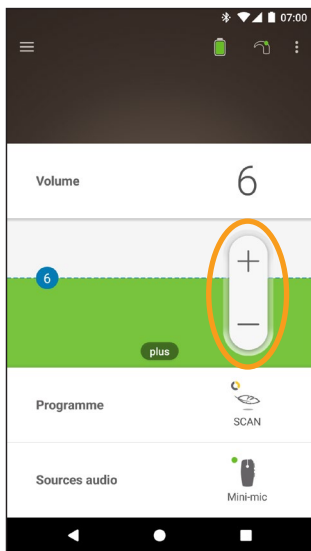


Changement de programme

1. Appuyez sur **Programme** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur l'icône correspondant au programme que vous souhaitez utiliser.

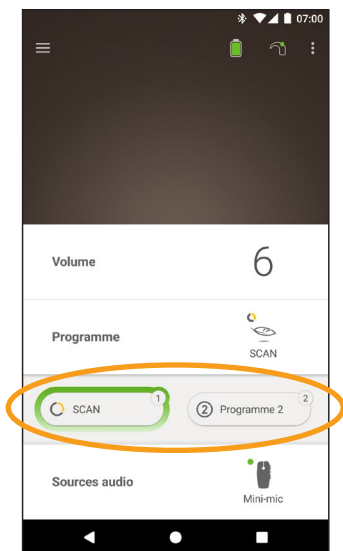

Diffusion d'un contenu audio

1. Appuyez sur **Sources audio** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur l'**icône** de la source audio que vous souhaitez utiliser.

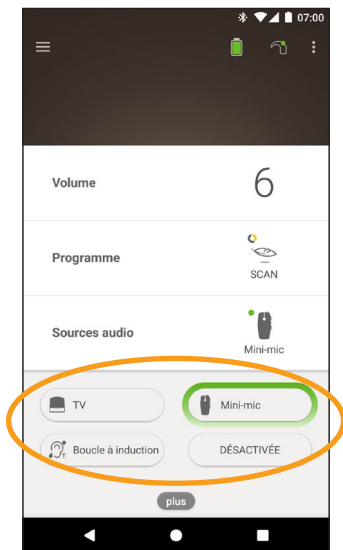

CONSEIL

Appuyez sur **Désactivé(e)** pour arrêter la diffusion audio et revenir au programme précédent.

Réglage du contenu audio diffusé



Vous pouvez modifier séparément le volume du contenu audio diffusé et du son des microphones de votre processeur.



REMARQUE

Les paramètres de la source audio reviennent à leur valeur par défaut lorsque vous arrêtez votre processeur.

1. Démarrez la diffusion à partir d'une source audio.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration **Paramètres de la source audio**.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier les paramètres.

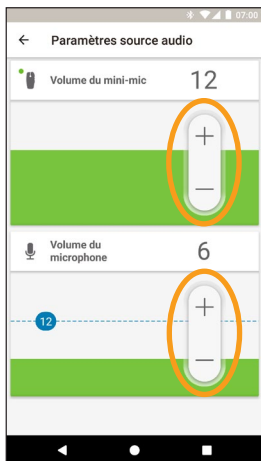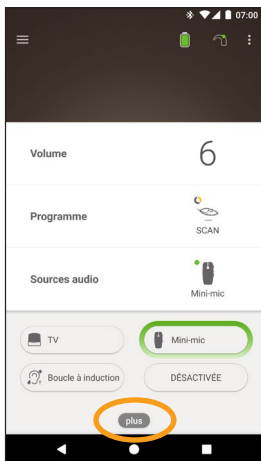

4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau de configuration **Paramètres de la source audio**.



Réglage de la sensibilité



REMARQUE

- L'accès au réglage de la sensibilité n'est possible que s'il est activé par votre régleur.
- La sensibilité revient à sa valeur par défaut lorsque vous arrêtez votre processeur.

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration mySmartSound.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier la sensibilité.

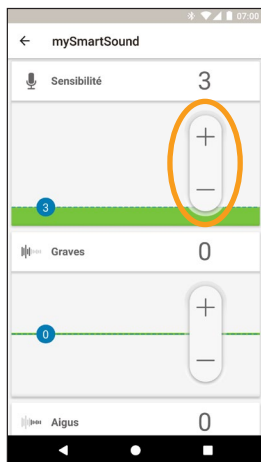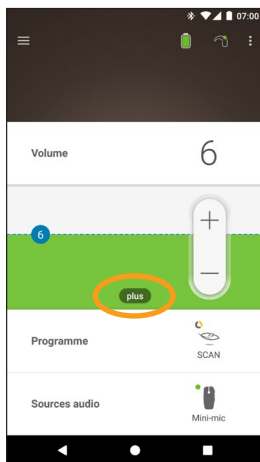

4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau de configuration mySmartSound.

Réglage des basses et hautes fréquences



REMARQUE



L'accès au réglage des basses et hautes fréquences n'est possible que s'il est activé par votre régleur.



AVERTISSEMENT

Procédez à ces ajustements uniquement lorsque vous percevez des sons ou des conversations. Une augmentation des basses ou hautes fréquences peut être à l'origine de sons forts ou de sensations d'inconfort sur les niveaux élevés. Si cela se produit, retirez immédiatement le processeur/l'antenne, et réduisez les niveaux des basses ou hautes fréquences avant de le/la remettre en place.

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration mySmartSound.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier les basses ou hautes fréquences.

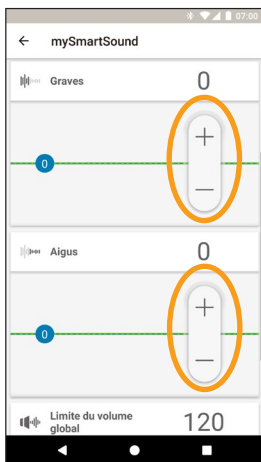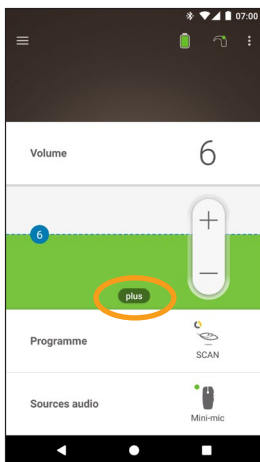

4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau de configuration mySmartSound.

Réglage de la limite du volume global



REMARQUE


L'accès au réglage de la limite du volume global n'est possible que s'il est activé par votre régleur.



AVERTISSEMENT

Procédez à ces ajustements uniquement lorsque vous percevez des sons ou des conversations. Une augmentation de la limite du volume global peut être à l'origine de sons très forts ou de sensations d'inconfort sur les niveaux élevés. Si cela se produit, retirez immédiatement le processeur/l'antenne, et réduisez la limite du volume global avant de le/la remettre en place.

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration **mySmartSound**.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier le volume global.

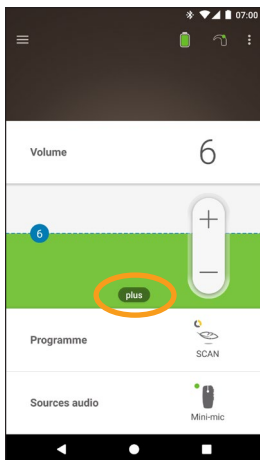

4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau de configuration **mySmartSound**.

Utilisation de ForwardFocus

ForwardFocus est une fonction supplémentaire qui permet de réduire le bruit émis derrière vous, et vous permet ainsi de vous concentrer sur les conversations en face à face dans un environnement bruyant tel qu'un café.


L'option ForwardFocus n'est disponible que si elle est activée par votre régleur. Une fois cette fonction activée, vous en avez le contrôle et pouvez l'activer et la désactiver selon vos besoins.

Lorsque vous utilisez ForwardFocus, essayez de vous assurer que les bruits parasites proviennent de derrière vous.

N'oubliez pas de désactiver la fonction lorsque vous changez d'environnement d'écoute, par exemple lorsque vous passez d'un café bruyant à une pièce calme.

Si vous êtes le soignant d'un enfant, vous devez discuter avec votre régleur pour connaître la pertinence de cette fonction. Il est important que votre enfant puisse signaler le moment où ForwardFocus n'est plus nécessaire et où les programmes habituels doivent être utilisés.

1. Appuyez sur **Programme** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Activez l'option **ForwardFocus**.

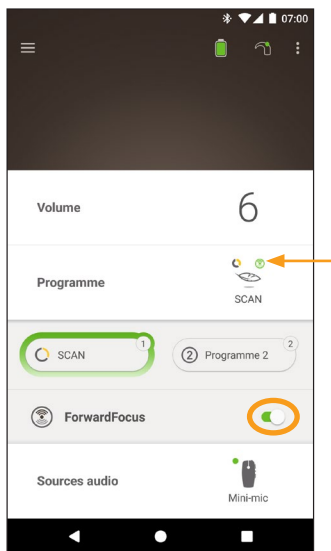


REMARQUE

Si vous éteignez votre processeur, l'option ForwardFocus se désactive et vous devrez l'activer de nouveau lorsque vous en aurez besoin.


Contrôle de l'état

Appuyez sur les icônes pour ouvrir l'écran **État**.

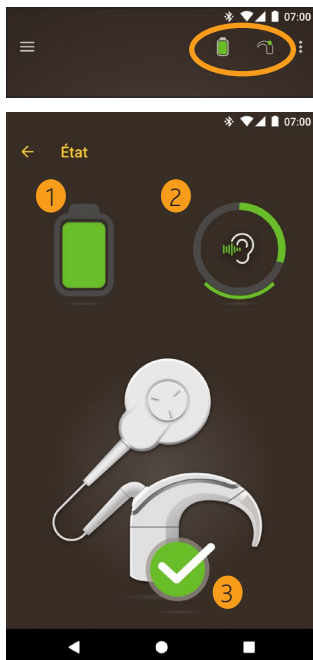

- 1 Niveau de charge de la batterie du processeur.
- 2 Niveau sonore fourni au processeur. L'icône affiche la source (par ex., des microphones, une boucle à induction, un accessoire sans fil). La barre colorée indique le niveau.
- 3 Indicateur d'état du processeur :
 - Un indicateur vert indique l'absence de panne


Si votre processeur présente une panne, un écran s'affiche, comme celui figurant ci-dessous :

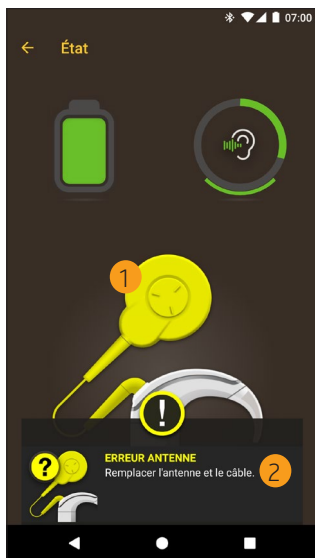

- 1 La partie du processeur présentant une panne s'affiche en jaune.
- 2 Description de la panne et solution suggérée.

Menu Paramètres

Appuyez sur l'icône **menu** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le menu **Paramètres**.

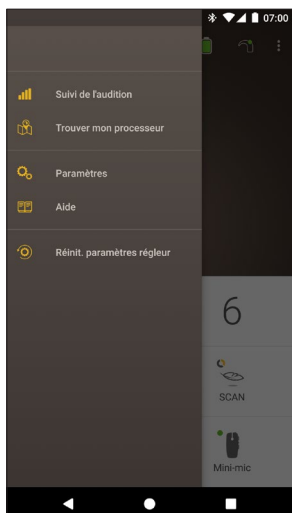


Appuyez sur **Réinitialiser paramètres** pour modifier les paramètres de votre processeur et revenir aux paramètres définis par votre régleur.

Appuyez sur **Essayer appli en Démo** pour découvrir comment utiliser l'application sans affecter votre/vos processeur(s).*

* Cette fonction n'est peut-être pas disponible sur la version de votre application.

Appuyez sur **Paramètres** pour ouvrir l'écran **Paramètres**.

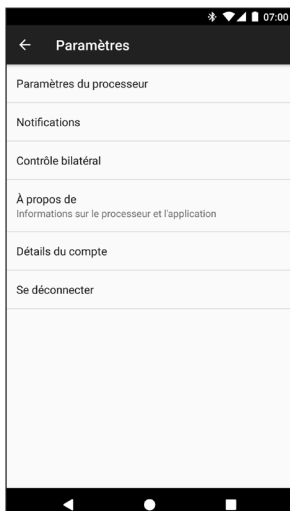

Appuyez sur **Paramètres du processeur** pour :

- Verrouiller le bouton du processeur
- Activer/Désactiver les bips
- Définir des témoins lumineux.

Appuyez sur **Notifications** pour activer/désactiver les notifications.

Appuyez sur **Contrôle bilatéral** pour choisir de contrôler deux processeurs simultanément ou séparément.*

* Cette fonction n'est peut-être pas disponible sur la version de votre application.

Dépannage

Problème	Solution
Vous avez du mal à vous connecter à l'application	<ol style="list-style-type: none">1. Redémarrez votre processeur.2. Redémarrez l'application.3. Redémarrez l'appareil qui exécute l'application.
Vous ne recevez pas les notifications	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que l'option Notifications est activée sur l'écran Paramètres.

Ce logiciel remplit les exigences essentielles présentées dans l'annexe 1 de la directive CE 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs selon la procédure d'évaluation de conformité visée à l'annexe 2.



L'autorisation d'apposer le marquage CE a été accordée en 2018.

Hear now. And always

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Canada Inc 2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada
Tel: +1 416 972 5082 Fax: +1 416 972 5083

Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Benelux NV Schaliënhoedredreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium
Tel: +32 15 79 55 11 Fax: +32 15 79 55 70

Cochlear France S.A.S. 135 Route de Saint-Simon, 31035 Toulouse, France
Tel: +33 5 34 63 85 85 (International) or 0805 200 016 (National) Fax: +33 5 34 63 85 80

Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy
Tel: +39 051 601 53 11 Fax: +39 051 39 20 62

Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 14 61 Fax: +46 31 335 14 60

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey
Tel: +90 216 538 5900 Fax: +90 216 538 5919

Cochlear (HK) Limited Room 1204, 12/F, CRE Building, No 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong SAR
Tel: +852 2530 5773 Fax: +852 2530 5183

Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon Building 33, Teheran-ro 8 gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel: +82 2 533 4450 Fax: +82 2 533 8408

Cochlear Medical Device (Beijing) Co., Ltd
Unit 2208-2212, Tower B, Gemdale Building, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R. China
Tel: +86 10 5909 7800 Fax: +86 10 5909 7900

Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd.
Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051, India
Tel: +91 22 6112 1111 Fax: +91 22 6112 1100

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

Cochlear Middle East FZ-LLC
Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 818 4400 Fax: +971 4 361 8925

Cochlear Latinoamérica S.A.
International Business Park, Building 3835, Office 403, Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220 Fax: +507 830 6218

Cochlear NZ Limited
Level 4, Takapuna Towers, 19-21 Corno St, Takapuna, Auckland 0622, New Zealand
Tel: +64 9 914 1983 Fax: 0800 886 036

www.cochlear.com



ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, CareYourWay, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, Cochlear SoftWear, Codacs, ConnectYourWay, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, HearYourWay, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, le logo en forme d'ellipse, WearYourWay et Whisper sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Ardiium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, Vistafix et WindShield sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Android est une marque de commerce de Google Inc. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

© Cochlear Limited 2018

D1359293 ISS1
French translation of D1320964 ISS1 MAY18

